


# WIZARD

## *Navigator*

*System for root canals preparation*

*Sistema para la instrumentación de los conductos radiculares*

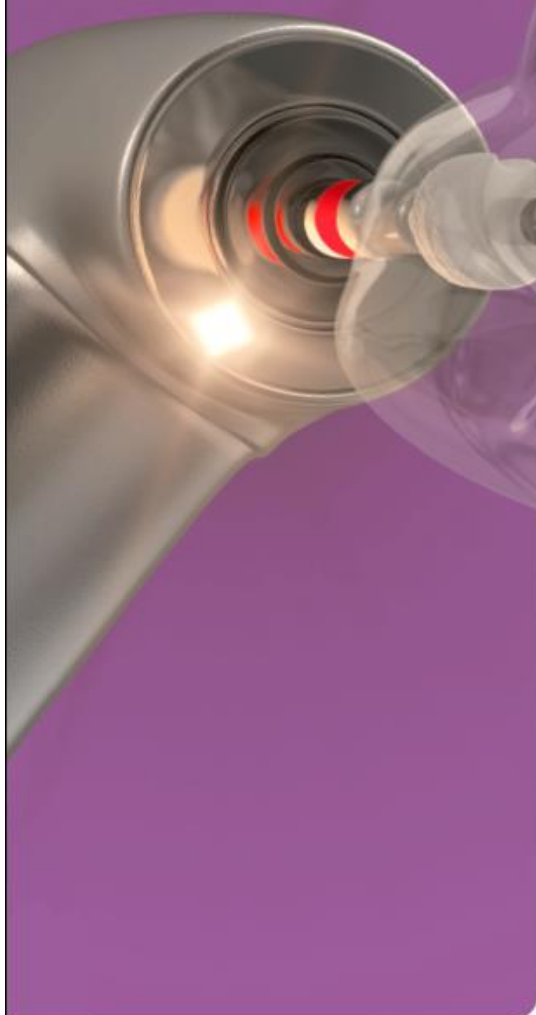

- Special blade and better sharpness
  - Compact, easy to use and very efficient
  - Less risk of perforation thanks to inactive point
  - Top results in minimum time
  - Designed with front professionals
- Arista especial para un mejor corte
  - Compacto, fácil de usar y muy eficiente
  - Riesgo de perforación menor gracias a su punta no activa
  - Los mejores resultados en un tiempo reducido
  - Diseñado por los mejores profesionales



*See page 48*

*Detalles – página 48*

# ENDODONCY ENDODONCIA



## WIZARD Navigator

- NiTi system for root canal treatment
- Sistema rotatorios de níquel-titanio para la instrumentación de los conductos radiculares

packing / embalaje  
6 pcs / unid

WIZARD Navigator

|                        | W-1        | W-2  | W-3  | W-4  | W-5  | W-6  | W-7  | W-8  | W-9  | W-XN | W-File      | W-File     | W-File         |
|------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|----------------|
| Taperratio - Conicidad | 4%         | 5%   | 6%   | 6%   | 6%   | 6%   | 6%   | 4%   | 4%   |      |             |            |                |
| ISO                    | 010        | 015  | 020  | 025  | 030  | 035  | 040  | 035  | 040  | 025  | 006         | 008        | 010            |
| L = 21                 | 144 50 ... | 1335 | 1345 | 1355 | 1365 | 1375 | 1385 | 1395 | 1405 | 1415 |             |            |                |
| L = 25                 | 144 50 ... | 0495 | 1035 | 0105 | 0115 | 0125 | 0595 | 0605 | 0545 | 0555 |             |            |                |
| L = 31                 | 144 50 ... | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1465 | 1475 | 1485 | 1495 | 1505 | 144 50 1135 | 144 51 ... | 9372 9382 9392 |

### Recommended setting for endomotor:

Ajuste recomendado para el endomotor:

| Instrument WIZARD Navigator<br>Instrumento WIZARD Navigator | Marking<br>Designación | Revolution (min. <sup>-1</sup> )<br>Velocidad (1/min.) | Torsion (N.cm)<br>Torque (N.cm) |
|---|------------------------|--|---------------------------------|
| W-1   | 4/010                  | 140-180  | 1.2                             |
| W-2   | 5/015                  | 140-180  | 1.2                             |
| W-3   | 6/020                  | 140-180  | 2.1                             |
| W-4   | 6/025                  | 140-180  | 2.1                             |
| W-XN  | 7/025                  | 140-180  | 2.3                             |
| W-5   | 6/030                  | 140-180  | 2.3                             |
| W-6   | 6/035                  | 140-180  | 2.3                             |
| W-7   | 6/040                  | 140-180  | 2.3                             |
| W-8   | 4/035                  | 140-180  | 2.3                             |
| W-9   | 4/040                  | 140-180  | 2.3                             |

Maximum revolutions 250 min<sup>-1</sup> (R.P.M.)  
Velocidad máxima 250 min<sup>-1</sup> (R. p. m.)



Instructions for use - page 75  
Instrucciones de uso - página 75

**WIZARD Navigator – Set I**

Basic set / Kit básico

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 21 | 144 45 1075 |
| L = 25 | 144 45 0955 |
| L = 31 | 144 45 1105 |

Sets contain 6 instruments  
Cada kit contiene 6 unidades

|                              |    |  |
|------------------------------|----|--|
| WIZARD Navigator W-1; 4/010  | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-2; 5/015  | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-3; 6/020  | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-4; 6/025  | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-5; 6/030  | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-XN; 7/025 | 1x |  |

**WIZARD Navigator – Set II**

Complementary set / Kit complementario

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 21 | 144 45 1085 |
| L = 25 | 144 45 0965 |
| L = 31 | 144 45 1115 |

Sets contain 6 instruments  
Cada kit contiene 6 unidades

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| WIZARD Navigator W-6; 6/035 | 2x |  |
| WIZARD Navigator W-7; 6/040 | 2x |  |
| WIZARD Navigator W-8; 4/035 | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-9; 4/040 | 1x |  |

**WIZARD Navigator – Set III**

Probing set / Kit de sondaje

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 25 | 144 55 1122 |
|--------|-------------|

Set contains 6 instruments  
El kit contiene 6 unidades

|             |                 |    |  |
|-------------|-----------------|----|--|
| 144 51 9372 | W-File; 006 L25 | 2x |  |
| 144 51 9382 | W-File; 008 L25 | 2x |  |
| 144 51 9392 | W-File; 010 L25 | 2x |  |

**WIZARD Navigator – Set IV**

Economy set / Kit económico

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 21 | 144 45 1065 |
| L = 25 | 144 45 0945 |
| L = 31 | 144 45 1095 |

Sets contain 6 instruments  
Cada kit contiene 6 unidades

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| WIZARD Navigator W-1; 4/010 | 2x |  |
| WIZARD Navigator W-2; 5/015 | 2x |  |
| WIZARD Navigator W-3; 6/020 | 2x |  |



Start kit WIZARD Navigator  
basic set L25 + video + instructions

Start kit WIZARD Navigator  
kit básico + vídeo + instrucciones

144 45 0985



Cassette and stand for WIZARD  
Navigator without instruments

Caja y organizador para WIZARD  
Navigator sin instrumentos

139 50 0880 65 × 52 × 52 mm



Cassette  
Caja

139 50 0430



Stand  
Organizador

139 50 0870



# ENDODONCY ENDODONCIA

## UNICONE

time for change

### System for root canals preparation with reciprocal movement

Made from high flexible Nickel-Titanium with extended lifetime thanks to a special technology treatment


- > Effectiveness
- > Flexibility
- > Originality



### Sistema mecanizado para el preparo de canales radiculares con movimiento recíprocante

Hecho de níquel-titanio altamente flexible con vida extendida gracias a un proceso de tratamiento especial durante su fabricación

- > Efectividad
- > Flexibilidad
- > Originalidad

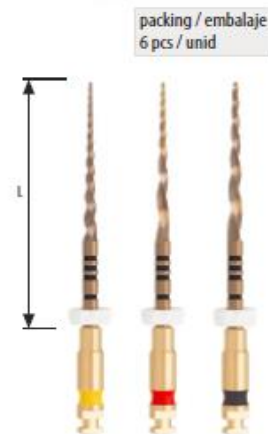

| Taper ratio – Conicidad | 6%                                    | 6%                                 | 6%                                   |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ISO                     | 020                                   | 025                                | 040                                  |
|                         | <span style="color: yellow;">■</span> | <span style="color: red;">■</span> | <span style="color: black;">■</span> |

|        |             |      |      |      |
|--------|-------------|------|------|------|
| L = 21 | 144 50 .... | 1305 | 1315 | 1325 |
| L = 25 | 144 50 .... | 1275 | 1285 | 1295 |
| L = 31 | 144 50 .... | 1875 | 1885 | 1895 |

### Set Unicone I

#### Unicone Set of 3

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 21 | 144 45 1125 |
| L = 25 | 144 45 1025 |
| L = 31 | 144 45 1155 |

Sets contain 3 instruments  
Cada kit contiene 3 unidades

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| Unicone; 6/020 | 1x |  |
| Unicone; 6/025 | 1x |  |
| Unicone; 6/040 | 1x |  |

### Set Unicone II

#### Unicone Set of 6

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 21 | 144 45 1135 |
| L = 25 | 144 45 1035 |
| L = 31 | 144 45 1165 |

Sets contain 6 instruments  
Cada kit contiene 6 unidades

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| Unicone; 6/020 | 2x |  |
| Unicone; 6/025 | 2x |  |
| Unicone; 6/040 | 2x |  |

### Set Unicone III

#### MEDIN Endo Set

|        |             |
|--------|-------------|
| L = 21 | 144 45 1145 |
| L = 25 | 144 45 1045 |
| L = 31 | 144 45 1175 |

Sets contain 6 instruments  
Cada kit contiene 6 unidades

|                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| W-File; 008 L25             | 1x |  |
| W-File; 010 L25             | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-1; 4/010 | 1x |  |
| WIZARD Navigator W-2; 5/015 | 1x |  |
| Unicone; 6/020              | 1x |  |
| Unicone; 6/025              | 1x |  |

### Start Kit Unicone

144 45 1055

|   |    |
|---|----|
| 144 45 1025<br>Set Unicone I  | 1x |
| 144 91 1037<br>Set Gutta Percha Points 6/015–040<br>Conos de gutta percha 6/015–040 | 1x |
| 144 91 1072<br>Set Absorbent Paper Points 6/015–040<br>Conos de papel 6/015–040     | 1x |
| Product Brochure Unicone<br>Folleto de productos Unicone                            | 1x |
| Instructions for use<br>Instrucciones de uso  | 1x |



Instructions for use – page 76  
Instrucciones de uso – página 76